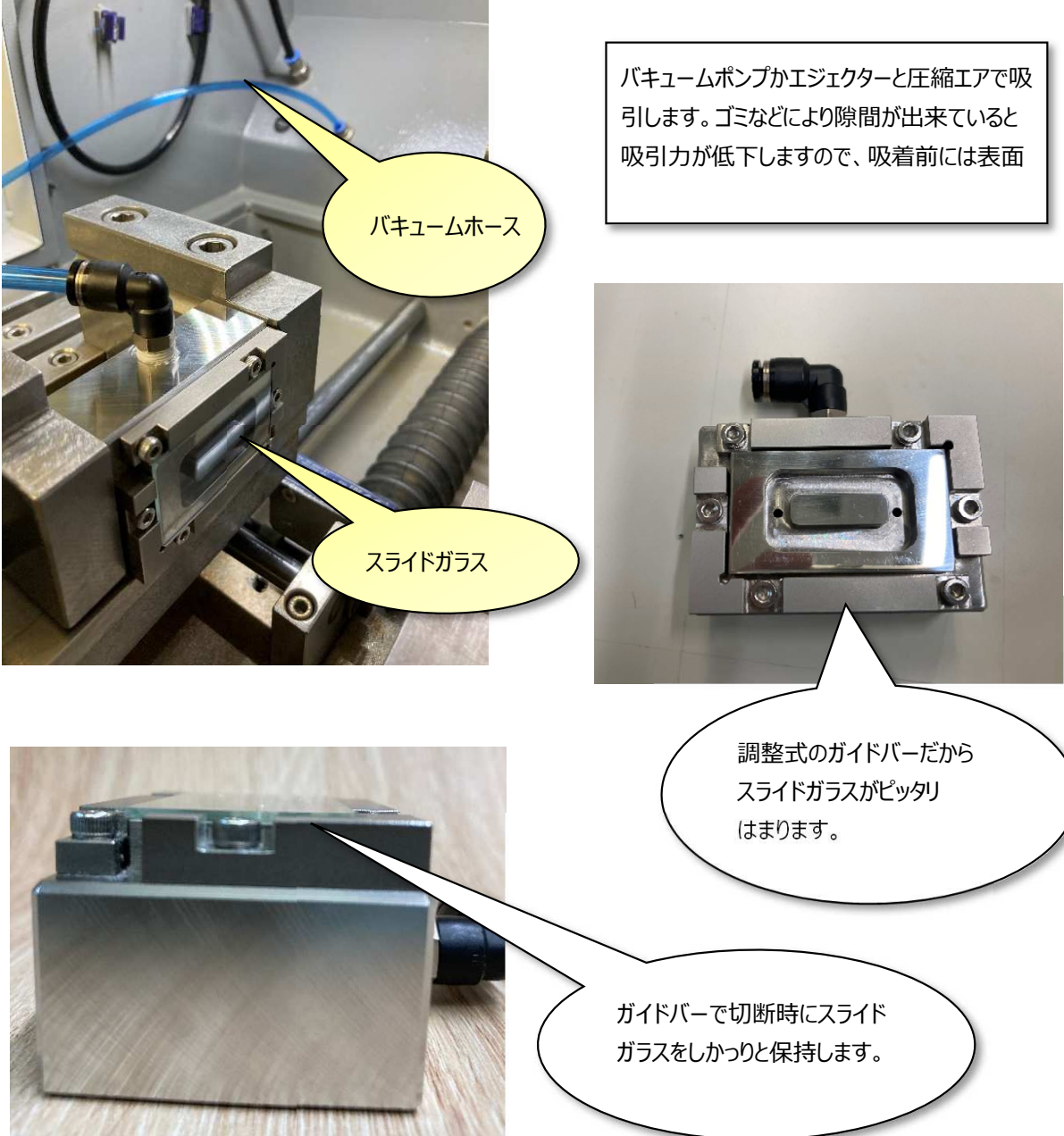


品番	GR0579
品名	薄片試料用バキュームホルダー
概要	スライドガラスを吸着して固定します。
取説	<p>バキュームホルダーをワンタッチクランプ(GR0548)で固定し使用します。</p> <p>スライドガラスに接着した試料を吸引しクランプします。</p> <p>主に、岩石などの切断で使用されます。</p>
イメージ図	 <p>バキュームポンプかエジェクターと圧縮エアで吸引します。ゴミなどにより隙間が出来ていると吸引力が低下しますので、吸着前には表面</p> <p>バキュームホース</p> <p>スライドガラス</p> <p>調整式のガイドバーだからスライドガラスがピッタリはまります。</p> <p>ガイドバーで切断時にスライドガラスをしっかりと保持します。</p>